



EN 166: 2001

ПРОИЗВОДИТЕЛ

PORTWEST, IDA Business Park, Westport, Co Mayo, F28 FY88, Ireland

Име и адрес на органа, издал сертификат за ЕО

Нотифициран орган: Модули В и С2 - SATRA Technology Europe Ltd, Business Park Bracetown, Clonee, D15YN2P, Ирландия (нотифициран орган 2777).

BG

CV15, CV17 300 микрона APET щит за лице (100)



Тези продукти са класифицирани като лична предпазна екипировка от категория III (ЛПС) съгласно Европейския регламент за ЛПС (ЕС) 2016/425 като щите са тествани спрямо Хармонизирания европейски стандарт EN 166: 2001 (виж по-долу) и отговарят на настоящия регламент.

Този продукт е проектиран да осигури защита срещу контакт с въздушни капчици, които могат да представляват биологична опасност.

Не забравяйте, че нито един елемент от ЛПС не може да осигури пълна защита и винаги трябва да се внимава при извършване на свързаната с риска дейност.

Никога не използвайте тази козирка за защита срещу други опасности, за които продуктът не е проектиран или тестван.

ЕФЕКТИВНОСТ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ УПОТРЕБА

Тези продукти са тествани в съответствие с EN 166: 2001

Клаузи: 6; Дизайн; 7.1.1; Зрително поле; 7.1.2.1; Рефрактивна мощност; 7.1.2.2; Пропускливост; 7.1.2.3; Дифузия на светлина; 7.1.3; Качество на материалите; 7.1.5.1; Стабилност при повишена температура; 7.1.7; Устойчивост на възпламеняване; 7.2.4; Капки и пръски течности

МОНТАЖ И РАЗМЕР

За да поставите и сваляте продуктите, моля обърнете се към инструкциите за употреба. Носете само продукти с подходящ размер, които са правилно регулирани. Продуктите, които са твърде хлабави, може да не останат на мястото, а ако са твърде плътно поставени, ще ви бъде неудобно.

СЪВМЕСТИМОСТ

За да оптимизирате защитата, ще е необходимо да използвате тези продукти с подходящи ръкавици / маски. Преди да извършите свързана с риска дейност, консултирайте се с вашия доставчик или надзорник, за да се уверите, че всички ваши лични защитни продукти са съвместими и подходящи за вас.

ВНИМАНИЕ

Някои части от визьора, които са в пряко контакт с кожата ви, могат да причинят алергични реакции. В този случай моля прекратете употребата и потърсете медицинска помощ.

СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТ

Когато не се използва, съхранявайте визьора на добре проветриво място, далеч от екстремни температури. Никога не поставяйте тежки предмети върху него. Ако е възможно, избягвайте прекомерното съхранение и за предпочитане го съхранявайте да виси вертикално. Ако продуктът е мокър, оставете го да изсъхне напълно, преди да го поставите за съхранение. Моля, съхранявайте продукта на тъмно, далеч от слънчева светлина, когато не се използва.

ОБЕЗЦЕНЯВАНЕ

Визьорът има срок на годност 3 години. Експлоатационният живот ще зависи от условията на употреба, като визьорът трябва да се замени, ако е силно надраскан или повреден по някакъв начин, който

предотвратява безопасното използване

ПОПРАВКА

Ако визьор се повреди, той НЕ може да осигури оптимално ниво на защита и следователно трябва незабавно да бъде заменен. Никога не използвайте повреден продукт. Ако имате съмнения, винаги се консултирайте с производителя, преди да се опитате да го поправите.

ПОЧИСТВАНЕ

Прилагайте само следите препоръчителни правила за почистване - Изплакнете с топла сапунена вода. НИКОГА не използвайте почистващи препарати на основата на разтворители.

Не трябва да се използват остриета или други остри инструменти, абразивни или силно алкални детергенти, разтворители, оловен бензен и тетрафторид въглерод.

Използвайте кърпа от микрофибър, която просто е навлажнена с вода.

В случай на по-голямо натрупване на мръсотия или по-специално на мазни петна, използвайте почистващи препарати или разредители без ацетон и бензен.

NB: Всичко по-горе се отнася само за външната страна на визьора, където не е нанесено покритие против замъгляване.

Препоръките на COVID 19 е, че всички служители във всички индустрии измиват козирката си в края на работния ден с нищо повече от топла сапунена вода.

МАРКИРАНЕ


Продуктът е маркиран с:

i. Маркировката CE, показваща, че продуктът отговаря на изискванията на Регламента за ЛПС (ЕС) 2016/425.

ii. Идентификация на производителя и кода на продукта / номер на артикул.

iii. Пиктограмата на книгата, посочена в тези инструкции

МОНТАЖ ДИАГРАМА

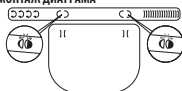

1. Сгънете езичетата на лентата за глава, както е показано



2. Поставете ушите на лентата в прорезите на прозрачния щит.



3. С помощта на езичета и слотове в кашката регулирайте лентата според желаното прилагане.

Изпратете декларация за съответствие @ www.portwest.com/declarations