



EN 166:2001

TOOTJA

PORTWEST, IDA Business Park, Westport, Co Mayo, F28 FY88, Ireland

EL sertifikaadi väljastanud Teavitatud asutuse nimi ja aadress

Teavitatud asutus: Moodul B ja C2 - SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, D15YN2P. Iiri vabariik (Teavitatud asutus 2777).

EE

CV15, CV17 300 Mikron APET Näomask (100)



Need tooted on Euroopa IKV määruses (EL) 2016/425 klassifitseeritud III kategooria isikukaitsevahenditeks (IKV) ning on tõestatud, et need vastavad käesolevale määrusele piiratud katsetamise teel ühtlustatud standardile EN 166:2001 (vt allpool)

See toode on ette nähtud kaitseks kokkupuute eest õhus olevate piiskadega, mis võivad kujutada endast bioloogilist ohtu.

Pidage meeles, et ükski IKV ei suuda pakkuda täielikku kaitset ja riskiga seotud tegevusega tuleb alati olla ettevaatlik.

Ärge kunagi kasutage seda visiiri kaitseks muude ohtude eest, mille jaoks toode pole ette nähtud või testitud.

TOIMIVUS JA PIIRANGUD KASUTAMISEL

See toode on testitud vastavuses standardiga EN 166:2001

Klauslid: 6; Kujundus; 7.1.1; Vaateväli; 7.1.2.1; Murdumispunkt; 7.1.2.2; Läbilaskvus; 7.1.2.3; Valguse difusioon; 7.1.3; Materjalide kvaliteet; 7.1.5.1; Stabiilsus kõrgendatud temperatuuril; 7.1.7; Süttimiskindlus; 7.2.4; Vedelike tilgad ja pritsmed

SOBIVUS JA ISTUVUS

Toote peale panemiseks ja ära võtmiseks, lugege palun kasutusjuhendit. Kandke ainult sobiva suurusega tooteid, mis on õigesti reguleeritud. Tooted, mis on liiga suured ei pruugi püsida oma kohal ja liiga kitsad on ebamugavad.

ÜHILDUVUS

Kaitse optimeerimiseks on vaja neid tooteid kasutada koos sobivate kinnaste/kittide/maskidega. Sellisel juhul pidage enne riskiga seotud tegevust nõu oma tamiija või juhendajaga veendumaks, et kaitsevahendid on teie tegevuseks sobivad.

HOIATUS

Visiiri osad, mis puutuvad kokku nahaga, võivad põhjustada allergilisi reaktsioone. Sel juhul lõpetage koheselt kasutamine ja pöörduge arsti poole.

LADUSTAMINE JA TRANSPORT

Kui te toodet ei kasuta, hoidke seda hästi ventileeritud kohas, eemal äärmuslikest temperatuuridest. Ärge kunagi asetage selle peale raskeid esemeid. Kui võimalik vältige liigset voltimist ja hoidke seda eelistatavalt vertikaalselt. Kui toode on märg, laske sel täielikult kuivada enne ladustamist. Kui seda ei kasutata, hoidke toodet pimedas ja eemal päikese valgusest.

KASUTUSEST EEMALDAMINE

Visiiri säilivusaeg on 3 aastat. Kasutusaeg sõltub kasutustingimustest, kuid visiir tuleb hävitada ja asendada, kui see on tugevalt kriimustatud või kahjustatud. takistab ohutut kasutamist

PARANDAMINE

Kui visiir saab kahjustada, EI OLE sel optimaalset kaitset ja seetõttu tuleks see viivitamatult asendada. Ärge kunagi kasutage kahjustatud toodet. Kui teil on kahtlusi, pidage enne paranduste tegemist nõu tootjaga.

PUHASTAMINE

Kasutage ainult soovitatud puhastust

Loputage sooja seebiveega, ÄRGE KUNAGI kasutage lahustipõhiseid puhastusvahendeid.

Zillette ega muid abrasiivseid või tugevalt aluselisi detergente, lahusteid, pliiibenseeni ja süsiniktetrakloriidi ei tohi kasutada.

Kasutage mikrokiudlappi, mis on lihtsalt veega niisutatud.

Eriti suure mustuse või rasvaste plekkide kogunemise korral, kasutage atsetooni- ja benseenivabu puhastusvahendeid või vedeldajaid.

NB: Kõik ülahtoodu kehtib visiiri välisküljele ainult siis, kui sellele pole paigaldatud Anti Fog katet.

COVID 19 soovitus on, et kõigi tööstusharude töötajad pesevad visiiri tööpäeva lõpus sooja seebiveega.

MARKEERING


Toode on tähistatud:

i: CE märgis, mis näitab, et toode vastab IKV määrule (EL) 2016/425 nõuetele.

ii: Tootja identifitseerimine ja tootekood/artikli number.

iii: raamatupiktogramm näitab, et lugege neid juhiseid.

KOOSTAMINE DIAGRAMM

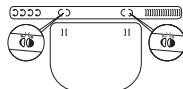

1. Keerake peapaela rihtmud nagu näidatud



2. Sisestage peapaela lapatsid visiiri piludesse.



3. Reguleerige rihtmud vaheaukude abil sobivaks.