



EN 166: 2001

FABRICANTE

PORTWEST, IDA Business Park, Westport, Co Mayo, F28 FY88, Ireland

Nombre y dirección del organismo notificador expedidor del certificado.

Organismo notificador: Module B and C2- SATRA Technology Europe, Ltd, Bracetown Business Park, Clonee D15YN2P Republica de Irlanda,

(Organismo notificador 2777)

ES

CV15, CV17 Pantalla facial de APET 300 micras (100)



Estos productos están clasificados como Equipo de Protección Individual (EPI) de Categoría III por el Reglamento Europeo de EPIs (UE) 2016/425 y se ha demostrado que cumplen con este Reglamento, a través de ensayos limitados, según la Norma Europea Armonizada EN 166: 2001 (ver más abajo).

Este producto está diseñado para proporcionar cierta protección contra el contacto con microgotas transmitidas por el aire que pueden constituir un peligro biológico. Sin embargo, recuerde siempre que ningún EPI puede proporcionar una protección completa y siempre se debe tener cuidado al realizar la actividad relacionada con el riesgo. Nunca use esta pantalla para protegerse contra otros peligros para los cuales el producto no está diseñado o probado.

RENDIMIENTO Y LIMITACIONES DE USO

Estos productos han sido ensayados de acuerdo con EN 166: 2001 Cláusula 6 ; Diseño; 7.1.1 ; Campo de Visión 7.1.2.1 ; Poder de refracción; 7.1.2.2 ; Transmitancia; 7.1.2.3 ; Difusión de la luz; 7.1.3 ; Calidad de materiales; 7.1.5.1 ; Estabilidad a elevada temperatura; 7.1.7 ; Resistencia a la ignición; 7.2.4 ; Gotas y salpicaduras de líquidos

AJUSTE Y TAMAÑO

Para ponerse o quitarse el producto, consulte las instrucciones para el usuario. Utilice únicamente, productos ajustados a su talla, que estén correctamente ajustados. Es posible que los productos que estén demasiado sueltos no se queden en su lugar y, si están demasiado apretados, resultarán incómodos.

COMPATIBILIDAD

Para optimizar la protección, será necesario utilizar estos productos con guantes/ batas/ máscaras adecuadas. En este caso, antes de realizar la actividad relacionada con el riesgo, consulte a su proveedor o supervisor para asegurarse de que todos sus productos de protección sean compatibles y adecuados para su aplicación.

AVISO

Las partes de la pantalla que entran en contacto con su piel pueden provocar reacciones alérgicas. En este caso, deje de usarlo y busque atención médica.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

Cuando no esté en uso, guarde la pantalla en un área bien ventilada lejos de temperaturas extremas. Nunca coloque objetos pesados encima. Si es posible, evite el plegado excesivo y guárdelo preferiblemente colgando verticalmente. Si el producto está húmedo, déjelo secar completamente antes de guardarlo. Guarde el producto en un lugar oscuro lejos de la luz solar cuando no esté en uso.

OBSOLESCENCIA

Esta pantalla tiene una vida útil de 3 años. La vida útil dependerá de las condiciones de uso, pero la pantalla debe desecharse y reemplazarse si está muy rayada o dañada de forma que evite un uso seguro

REPARACIÓN

Si la pantalla está dañada, NO proporcionará el nivel óptimo de protección y, por lo tanto, debe reemplazarse inmediatamente. Nunca use el producto dañado. En caso de duda, consulte siempre con el fabricante antes de intentar una reparación.

LIMPIEZA

Sólo use los tratamientos de limpieza recomendados. Enjuague con agua tibia y jabón NUNCA use agentes de limpieza con base de disolventes.

No se deben usar hojas de afeitar u otras herramientas afiladas, detergentes abrasivos o fuertemente alcalinos, disolventes, benceno con plomo y tetracloruro de carbono. Use un trapo de microfibra, simplemente mojado con agua. En el caso de una mayor acumulación de suciedad o, en particular, manchas de grasa, use limpiadores o diluyentes solventes sin acetona y sin benceno.


NB: Todo lo anterior solo se aplica al exterior de la pantalla donde no se ha aplicado ningún revestimiento antiempañamiento. Las recomendaciones de COVID 19 dicen que todos los empleados de todas las industrias se laven la pantalla al final de la jornada laboral sólo con agua tibia con jabón.

MARCADO

El producto está marcado con:

- La marca CE que muestra que el producto cumple con los requisitos del Reglamento EPI (UE) 2016/425.
- Identificación del fabricante y código de producto / número de artículo.
- El pictograma del libro que indica leer estas instrucciones

MONTAJE DIAGRAMA

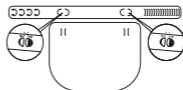

1. Doble las pestañas de la correa de la diadema que se muestra



2. Inserte las lengüetas de la diadema en las ranuras del protector transparente.



3. Usando lengüetas y ranuras en la correa, ajuste la correa al ajuste deseado.