



EN 166: 2001

### PROIZVOĐAČ

PORTWEST, IDA Business Park, Westport, Co Mayo, F28 FY88, Ireland

### Naziv i adresa prijavljenog tijela koje je izdalo EC certifikat

Prijavljeno tijelo: Module B i C2 - SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, D15YN2P. Republika Irska (Imenovano telo 2777).

# HR

## CV15, CV17 APET vizir 300 mikrona za lice (100)



Ovi su proizvodi klasificirani kao osobna zaštitna oprema (OZO) kategorije III prema Europskoj uredbi o OZO (EU) 2016/425 i pokazalo se da su u skladu s ovom Uredbom kroz ograničena ispitivanja u skladu s Harmoniziranim europskim standardom EN 166: 2001 (vidi dolje).

Ovaj je proizvod dizajniran je da pruži određenu zaštitu od kontakta sa kapljicama u zraku koje mogu predstavljati biološku opasnost. Međutim, uvijek imajte na umu da nijedan predmet OZO ne može pružiti potpunu zaštitu i uvijek se mora paziti tijekom obavljanja aktivnosti povezane s rizikom.

Nikada nemojte koristiti ovaj vizir za zaštitu od drugih opasnosti za koje proizvod nije dizajniran ili testiran.

### UČINKOVITOST I OGRANIČENJA UPOTREBE

Ovi su proizvodi testirani u skladu s EN 166: 2001

Klauzule: 6 ; Dizajn; 7.1.1 ; Vidno polje; 7.1.2.1 ; Refrakcijske moći; 7.1.2.2 ; Prolaznost; 7.1.2.3 ; Difuzija svjetlosti; 7.1.3; Kvaliteta materijala; 7.1.5.1 ; Stabilnost na povišenoj temperaturi; 7.1.7 ; Otpornost na paljenje; 7.2.4 ; Kapljice i kapljice tekućina

### PODEŠAVANJE I VELIČINA

Za stavljanje i skidanje proizvoda pogledajte korisničke upute.

Nosite samo proizvode odgovarajuće veličine koji su ispravno prilagođeni. Prelabavi proizvodi možda neće ostati na mjestu, a ako su pretjesni, biti će neudobni.

### KOMPATIBILNOST

Da bi se optimizirala zaštita, bit će potrebno koristiti ove proizvode s prikladnim rukavicama / odjećom/ maskama. U tom slučaju, prije izvođenja aktivnosti povezane s rizikom, obratite se dobavljaču ili nadzorniku kako biste bili sigurni da su svi vaši zaštitni proizvodi kompatibilni i prikladni za vašu primjenu.

### UPOZORENJE

Dijelovi vizira koji dolaze u kontakt s kožom mogu dovesti do alergijskih reakcija. U tom slučaju prekinite upotrebu i potražite savjet liječnika.

### SKLADIŠTENJE I TRANSPORT

Kad se ne koristi, vizir čuvajte u dobro prozračenom prostoru, dalje od ekstremnih temperatura. Nikada ne postavljajte teške predmete na njega. Ako je moguće, izbjegavajte prekomjerno presavljanje i po mogućnosti ga pohranite okomito. Ako je proizvod mokar, pustite da se potpuno osuši prije nego što ga stavite u skladište. Molimo vas da proizvod kada se ne koristi čuvate na tamnom mjestu, dalje od sunčeve svjetlosti.

### ZASTARJELOST

Rok trajanja ovog vizira je 3 godine. Životni vijek ovisit će o uvjetima korištenja, ali vizir treba zbrinuti i zamijeniti ako je jako izgareban ili oštećen na neki način koji sprječava sigurno korištenje

### POPRAVAK

Ako se vizir ošteti, NEĆE pružiti optimalnu razinu zaštite i stoga ga treba odmah zamijeniti. Nikada nemojte koristiti oštećeni proizvod. Ako sumnjate, uvijek se obratite proizvođaču prije pokušaja popravka.

### ČIŠĆENJE

Koristite samo sljedeći preporučeni tretman čišćenja - Ispirite toplom vodom sapunom NIKADA nemojte koristiti sredstva za čišćenje na bazi otapala.

Ne smiju se upotrebljavati oštrice britve ili drugi oštri alati,

abrazivni ili jako alkalni deterdženti, otapala, olovni benzen i ugljični tetraklorid.

Koristite krpu od mikrovlakana koju jednostavno navlažite vodom. U slučaju većeg nakupljanja nečistoće ili masnih mrlja, posebno koristite sredstva za čišćenje ili razrjeđivanje bez acetona i benzena.

**NAPOMENA:** Sve gore navedeno odnosi se samo na vanjsku stranu vizira gdje nije nanesen premaz protiv zamagljivanja.

COVID 19 preporuka glasi da svi zaposlenici u svim industrijama na kraju radnog dana vizir operu ni u čemu drugome osim u toploj vodi sa sapunom.

### OZNAČAVANJE

Proizvod je označen sa:


i. Oznaka CE koja pokazuje da proizvod udovoljava zahtjevima

Uredbe o OZO (EU) 2016/425.

ii. Identifikacija proizvođača i šifra proizvoda / broj članka.

iii. Oznaka piktograma knjige koji označava da trebate pročitati ove upute

### SASTAVLJANJE DIJAGRAM

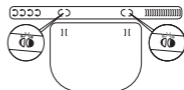

1. Preklopite jezičke na traci za glavu kako je prikazano



2. Umetnite jezičke trake za glavu u proreze na prozirnog viziru.



3. Korištenjem jezičaka i utora na traci prilagodite remen željenom položaju.

Izjavu o sukladnosti preuzmite na [www.portwest.com/declarations](http://www.portwest.com/declarations)