



EN 166:2001

### PRODUCENT

PORTWEST, IDA Business Park, Westport, Co Mayo, F28 FY88, Ireland

### Naam en adres van de notified body die het EC certificaat heeft uitgegeven.

Notified body: Module B and C2 - SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, D15YN2P. Republic of Ireland (Notified Body 2777).

# NL

## CV15, CV17 300 Micron APET gelaatsscherm (100)



Dit product is geclassificeerd als een categorie III Persoonlijk Beschermingsmiddel (PBM) via de Europese PBM richtlijn (EU) 2016/425 en voldoet aan de richtlijn door beperkte testen tegen de geharmoniseerde Europese Normering EN 166:2001 (zie hieronder)

Dit product is ontworpen om enige beschermingen te bieden tegen contact met druppeltjes in de lucht die een biologisch gevaar zouden kunnen vormen. Echter, onthoudt altijd dat geen enkele PBM volledige bescherming kan bieden en voorzichtigheid altijd geboden blijft bij het uitvoeren van de risico gerelateerde activiteit. Gebruik het vizier nooit voor bescherming tegen andere gevaren waar het product niet voor ontworpen en getest is.

### PRESTATIES EN GEBRUIKERSBEPERKINGEN

Deze producten zijn getest in overeenstemming met de EN166:2001 clausules: 6; Ontwerp; 7.1.1.; Gezichtsveld; 7.1.2.1; Refractieve krachten; 7.1.2.2; Doorlaatbaarheid; 7.1.2.3; Diffusie licht; 7.1.3; Kwaliteit van materialen; 7.1.5.1; Stabiliteit bij verhoogde temperatuur; 7.1.7; Weerstand tegen ontbranden; 7.2.4; Druppels en vloeistofspatten

### PASVORM EN MATEN

Zie de gebruikersinstructies voor informatie over het op- en afzetten van deze producten. Draag de producten alleen als dit de geschikte maat is en op een juiste manier ingesteld. Producten die te los zitten blijven mogelijk niet goed zitten en als ze te strak zitten is dit niet comfortabel.

### COMPABILITEIT

Om de bescherming te optimaliseren is het noodzakelijk deze producten te gebruiken in combinatie met geschikte handschoenen/maskers. Neem in dit geval contact op met de leverancier of supervisor om er zeker van te zijn dat alle beschermingsmiddelen bij elkaar gebruikt kunnen worden en de juiste bescherming bieden voor de werkzaamheden.

### WAARSCHUWING

Delen van het vizier die tegen de huid aankomen kunnen leiden tot een allergische reactie. Stop in dat geval met het gebruik en vraag medisch advies.

### OPSLAAN EN TRANSPORT

Indien niet in gebruik bewaar het vizier op een goed ventilerende plaats buiten extreme temperaturen. Plaats nooit iets zwaars boven op het vizier. Voorkom indien mogelijk vouwen en bewaar het vizier bij voorkeur verticaal. Als het product nat is, zorg dan dat deze gedroogd is voordat deze de opslagruimte ingaat. Bewaar op donkere plaats buiten zonlicht indien deze niet gebruikt wordt.

### VEROUDERD

Het vizier heeft een levensduur van 3 jaar. Gebruiksduur hangt af van de gebruiksomstandigheden. Het vizier dient vernietigd en vervangen te worden als er veel krassen op zitten of enige andere schade is ontstaan.

### VEILIG GEBRUIK

### REPARATIE

Als het vizier beschadigd is zal deze NIET meer het optimale beschermingsniveau bieden en moet daarom direct vervangen worden. Gebruik nooit een beschadigd product. Bij twijfel altijd contact opnemen met de producent voordat geprobeerd wordt de schade te herstellen.

### SCHOONMAKEN

Gebruik alleen de volgende aanbevolen schoonmaakbehandeling - Spoelen met warm zeepwater NOOIT oplosmiddelen Mesbladen en andere scherpe gereedschappen of sterke alkaline oplossingen, benzeen en chemicaliën mogen niet worden gebruikt. Gebruik een microfiber kledingstuk die in water gedoopt is. In geval van extreme vuiligheid maak gebruik van acetone - benzeen vrije - schoonmaakmiddelen of tinnere

### NB:

Al het bovenstaande geldt voor de buitenzijde van het vizier waar geen Anti Beslaan coating is aangebracht.


De COVID19 aanbeveling is dat alle werknemers in alle industrieën hun eigen vizier reinigen op het eind van de werkdag in niets anders dan warm zeepwater.

### Markering

Dit product is gemarkeerd met:

- De CE markering die aangeeft dat het product voldoet aan de vereisten van de PBM richtlijn (EU) 2016/425
- het identificatie nummer van de producent en de productcode/artikelnummer.
- De pictogrammen die aangeven de instructies te lezen

### SAMENSTELLING DIAGRAM

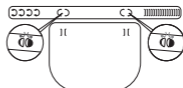

- Vouw de tabs op de hoofdband zoals aangegeven.



- Plaats de tabs van de hoofdband in de slots van het doorzichtige scherm.



- Gebruik de tabs en slots in de band om deze in de gewenste maat te stellen.