



EN 166:2001

PRODUCENT

PORTWEST, IDA Business Park, Westport, Co Mayo, F28 FY88, Ireland

Nazwa i adres Jednostki Notyfikowanej wydającej certyfikat WE

Jednostka Notyfikowana: Moduł B i C2 – SATRA Technology Europe Ltd,
Bracetown Business Park, Clonee, D15YN2P. Republika Irlandii
(Jednostka Notyfikowana 2777).

PL

CV15, CV17 Osłona twarzy APET 300 mikronów (100)



Te produkty zostały sklasyfikowane jako środki ochrony indywidualnej (ŚOI) kategorii III na mocy europejskiego Rozporządzenia w sprawie środków ochrony indywidualnej (UE) 2016/425 i wykazano ich zgodność z tym Rozporządzeniem poprzez ograniczone testy zgodności ze zharmonizowaną Normą europejską EN 166:2001 (patrz poniżej).

Ten produkt został zaprojektowany w celu zapewnienia pewnej ochrony przed kontaktem z unoszącymi się w powietrzu kroplami, które mogą stanowić zagrożenie biologiczne.

Należy jednak zawsze pamiętać, że żaden ŚOI nie zapewnia pełnej ochrony i zawsze należy zachować ostrożność podczas wykonywania czynności związanych z ryzykiem.

Nigdy nie używaj tej wizjerki do ochrony przed innymi zagrożeniami, dla których produkt nie został zaprojektowany lub nie został przetestowany.

PARAMETRY I OGRANICZENIA UŻYTKOWANIA

Te produkty zostały przetestowane zgodnie z normą EN 166:2001. Klauzule: 6; Design; 7.1.1; Pole widzenia; 7.1.2.1; Zdolności refrakcyjne; 7.1.2.2; Przepuszczalność; 7.1.2.3; Rozpraszanie światła; 7.1.3; Jakość materiałów; 7.1.5.1; Stabilność w podwyższonej temperaturze; 7.1.7; Odporność na zapłon; 7.2.4; Krople i rozpryski cieczy

DOPASOWANIE I WYMIARY

Aby poprawnie założyć i zdjąć produkt, zapoznaj się z instrukcją obsługi. Można nosić jedynie produkty o odpowiednim rozmiarze i prawidłowo wyregulowane. Produkty, które są zbyt luźne, mogą nie pozostać na miejscu, a zbyt ciasne będą niewygodne.

ZGODNOŚĆ

Aby zoptymalizować ochronę, konieczne będzie używanie tych produktów z odpowiednimi rękawicami / fartuchami / maskami. W takim przypadku przed wykonaniem czynności związanej z ryzykiem należy skonsultować się z dostawcą lub przełożonym, aby upewnić się, że wszystkie produkty ochronne są kompatybilne i odpowiednie do zastosowania.

OSTRZEŻENIE

Części osłony, które mają kontakt ze skórą, mogą powodować reakcje alergiczne. W takim przypadku należy zaprzestać używania i zasięgnąć porady lekarza.

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Kiedy wizjerka nie jest używana, przechowuj ją w dobrze wentylowanym miejscu, z dala od ekstremalnych temperatur. Nigdy nie stawiaj na niej ciężkich przedmiotów. Jeżeli to możliwe, unikaj nadmiernego składania i najlepiej przechowuj w pozycji wiszącej. Jeżeli produkt jest mokry, pozwól mu całkowicie wyschnąć przed umieszczeniem go w magazynie. Nieużywany produkt należy przechowywać w ciemnym miejscu, z dala od światła słonecznego.

STARZENIE SIĘ

Ten produkt ma okres trwałości 3 lata. Żywotność zależy od warunków użytkowania, ale wizjerkę należy wyrzucić i wymienić, jeśli jest mocno zarysowana lub uszkodzona w inny sposób, który zapobiega bezpiecznemu użytkowaniu

NAPRAWA

Jeśli wizjerka zostanie uszkodzona, NIE zapewni optymalnego poziomu ochrony i dlatego należy ją natychmiast wymienić. Nigdy nie używaj uszkodzonego produktu. W razie wątpliwości zawsze skonsultuj się z producentem przed przystąpieniem do naprawy.

CZYSZCZENIE

Można stosować tylko następujące zalecane metody czyszczenia - Splucz ciepłą wodą z mydłem i NIGDY nie używaj środków czyszczących na bazie rozpuszczalników.

Nie należy używać żyłetek ani innych ostrych narzędzi ściennych lub silnie alkalicznych detergentów, rozpuszczalników, benzyny ołowiowej i czterochlorku węgla.

Użyj ściereczki z mikrofibry zwilżonej po prostu wodą.

W szczególności w przypadku silniejszego zabrudzenia lub tłustych plam należy stosować środki czyszczące lub rozcieńczalniki nie zawierające acetonu i benzenu.

Uwaga: Wszystkie powyższe dotyczą tylko zewnętrznej części wizjera, na której nie zastosowano powłoki przeciw zapałowaniu. Zgodnie z zaleceniami dotyczącymi COVID 19 wszyscy pracownicy we wszystkich branżach myją wizjerki pod koniec dnia pracy jedynie w ciepłej wodzie z mydłem.

OZNAKOWANIE


Produkt oznaczony jest:

i. Znak CE świadczący o tym, że wyrób spełnia wymogi Rozporządzenia (UE) 2016/425 w sprawie ŚOI.

ii. Identyfikacja producenta i kod produktu / numer artykułu.

iii. Piktogram książki wskazujący, że należy przeczytać instrukcję

MONTAŻ DIAGRAM

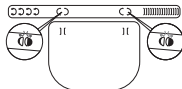

1. Złóż wypustki na pasku pałąka, jak pokazano



2. Wsuń wypustki opaski w szczeliny w przezroczystej osłonie.



3. Za pomocą wypustek i szczelin w pasku dopasuj pasek do pożądanego dopasowania.

Deklarację Zgodności można ściągnąć z www.portwest.com/declarations