



EN 166:2001

PRODUCĂTOR

PORTWEST, IDA Business Park, Westport, Co Mayo, F28 FY88, Ireland

Numele și adresa organismului notificat care a eliberat certificarea CE

Organism notificat: Modulul B și C2 - SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, D15YN2P. Republica Irlanda (organism notificat 2777).

RO

CV15, CV17 300 microni APET Face Shield (100)



Aceste produse sunt clasificate ca echipamente individuale de protecție individuală (EIP) de categoria III prin Regulamentul european EIP (UE) 2016/425 și s-a demonstrat că sunt conforme cu prezentul regulament prin teste limitate împotriva standardului european armonizat EN 166: 2001 (a se vedea mai jos).

Acest produs este conceput pentru a oferi o anumită protecție împotriva contactului cu picăturile din aer care pot constitui un pericol biologic. Cu toate acestea, amintiți-vă întotdeauna că niciun element din EIP nu poate oferi o protecție completă și trebuie să aveți întotdeauna grijă în timpul desfășurării activității legate de risc.

Nu folosiți niciodată această vizieră pentru protecție împotriva altor pericole pentru care produsul nu este conceput sau testat.

PERFORMANȚĂ ȘI LIMITĂRI DE UTILIZARE

Aceste produse au fost testate în conformitate cu EN 166: 2001 Clauze: 6; Proiecta; 7.1.1; Câmp vizual; 7.1.2.1; Puteri de refracție; 7.1.2.2; Transmiterea; 7.1.2.3; Difuzia luminii; 7.1.3; Calitatea materialelor; 7.1.5.1; Stabilitate la temperatură ridicată; 7.1.7; Rezistența la aprindere; 7.2.4; Picături și stropi de lichide

MONTAREA ȘI DIMENSIONAREA

Pentru a pune și scoate produse vă rugăm să consultați instrucțiunile utilizatorului. Purtați numai produse de dimensiuni adecvate, care sunt corect ajustate. Este posibil ca produsele prea slabe să nu rămână la locul lor și, dacă sunt prea strânse, vor fi inconfortabile.

COMPATIBILITATE

Pentru a optimiza protecția, va fi necesar să folosiți aceste produse cu mănuși / halate / măști adecvate. În acest caz, înainte de desfășurarea activității legate de riscuri, consultați furnizorul sau supraveghetorul pentru a vă asigura că toate produsele dvs. de protecție sunt compatibile și adecvate aplicației dumneavoastră.

AVERTIZARE

Părți ale vizierei care vin în contact cu pielea dvs. pot duce la reacții alergice. În acest caz, vă rugăm să întrerupeți utilizarea și să solicitați sfatul medicului.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Când nu este utilizat, depozitați viziera într-o zonă bine ventilată, departe de temperaturi extreme. Nu așezați niciodată obiecte grele deasupra acestuia. Dacă este posibil, evitați îndoirea excesivă și, de preferință, depozitați-l suspendat vertical. Dacă produsul este umed, lăsați-l să se usuce complet înainte de a-l depozita. Vă rugăm să păstrați produsul într-un loc întunecat, ferit de lumina soarelui, atunci când nu îl folosiți.

OBSESCENȚĂ

Această vizieră are o durată de valabilitate de 3 ani. Durata de viață va depinde de condițiile de utilizare, dar viziera trebuie aruncată și înlocuită dacă este zgâriată sau deteriorată într-un fel împiedicând utilizarea în siguranță

REPARAȚIE

Dacă viziera se deteriorează, NU va oferi nivelul optim de protecție și, prin urmare, trebuie înlocuită imediat. Nu folosiți niciodată produsul deteriorat. Dacă aveți dubii, consultați întotdeauna producătorul înainte de a încerca repararea.

CURĂȚAREA

Folosiți numai următorul tratament de curățare recomandat - Clătiți cu apă caldă și săpun NICIODATĂ nu folosiți agenți de curățare pe bază de solvent.

Nu trebuie utilizate lame de ras sau alte instrumente ascuțite, detergenți abrazivi sau puternici alcalini, solvenți, benzen cu plumb și tetraclorură de carbon.

Folosiți o cârpă din microfibră care este pur și simplu umezită cu apă.

În cazul unei acumulări mai mari de murdărie sau pete grase în special, utilizați detergenți sau diluanți fără acetonă și solvenți fără benzen.

NB: Toate cele de mai sus se aplică numai la exteriorul vizierei în care nu a fost aplicat niciun strat anti-ceață.

Recomandările COVID 19 sunt ca toți angajații din toate industriile să-și spele viziera la sfârșitul zilei de lucru în nimic mai mult decât apă caldă cu săpun.

MARCAR


Produsul este marcat cu:

eu. Marcatul CE care arată că produsul îndeplinește cerințele Regulamentului PPE (UE) 2016/425.

ii. Identificarea producătorului și codul produsului / numărul articolului.

iii. Pictograma cărții care indică citirea acestor instrucțiuni

ASAMBLARE DIAGRAMĂ

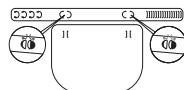

1. Îndoiti clemele de pe curea pentru bandă, așa cum se arată



2. Introduceți clemă de bandă în sloturile de pe ecranul transparent.



3. Folosind file și sloturi în curea, reglăți curea la potrivirea dorită.