



EN 166: 2001

TILLVERKARE

PORTWEST, IDA Business Park, Westport, Co Mayo, F28 FY88, Ireland

Namn och adress till det anmälda organet som har utfärdat EG-certifiering

Notified body: Module B and C2 - SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown
Business Park, Clonee, D15YN2P. Republic of Ireland (Notified Body 2777).

SE

CV15, CV17 300 Micron APET Ansiktsvisir (100)



Dessa produkter klassas som kategori III personlig skyddsutrustning (PPE) enligt den europeiska skyddsutrustningsförordningen (EU) 2016/425 och har visat sig uppfylla denna förordning genom begränsad testning mot den harmoniserade europeiska standarden EN 166: 2001 (se nedan).

Denna produkt är utformad för att ge ett visst skydd mot kontakt med luftburna droppar som kan utgöra en biologisk fara. Men kom alltid ihåg att inget föremål av personlig skyddsutrustning kan ge fullt skydd och försiktighet måste alltid vidtas när du utför den riskrelaterade aktiviteten.

Använd aldrig detta visir för att skydda mot andra faror som produkten inte är designad för eller testad mot.

PRESTANDA OCH ANVÄNDNINGSBEGRENSNINGAR

Dessa produkter har testats i enlighet med EN 166: 2001 Klausul:6; Design; 7.1.1; Synfält; 7.1.2.1; Brytningsförmåga; 7.1.2.2; Transmittans; 7.1.2.3; Diffusion av ljus; 7.1.3; Materialkvalitet; 7.1.5.1; Värmetålighet; 7.1.7; Tändningsmotstånd; 7.2.4; Droppar och stänk av vätskor

MONTERING OCH STORLEKAR

För att sätta på och ta av produkter, se användarinstruktionerna. Använd endast produkter av lämplig storlek som är korrekt justerade. Produkter som är för lösa kanske inte stannar på plats och om det är för hårt kommer det att vara obehagligt.

KOMPATIBILITET

För att optimera skyddet är det nödvändigt att använda dessa produkter med lämpliga handskar / klänningar / masker. I detta fall, innan du utför den riskrelaterade aktiviteten, kontakta din leverantör eller chef för att säkerställa att alla dina skyddsprodukter är kompatibla och lämpliga för din applikation.

VARNING

Delar av visiret som kommer i kontakt med din hud kan leda till allergiska reaktioner. Avbryt i så fall användningen och sök läkare.

LAGRING OCH TRANSPORT

Förvara visiret i ett väl ventilerat utrymme när det inte används, utom temperaturer. Placera aldrig tunga föremål ovanpå den. Undvik för mycket vikning om möjligt och förvara den helst hängande vertikalt. Om produkten är våt, låt den torka helt innan den förvaras. Förvara produkten på en mörk plats från solljus när den inte används.

Visiret har en hållbarhet på 3 år. Livslängden beror på användningsförhållandena men visiret ska kasseras och bytas ut om det är hårt repat eller skadat på något sätt förhindrar säker användning

REPARERA

Om visiret skadas ger det INTE den optimala skyddsnivån och bör därför bytas ut omedelbart. Använd aldrig den skadade produkten. Om du är osäker, kontakta alltid tillverkaren innan du försöker reparera.

RENGÖRING

Använd endast följande rekommenderade rengöringsbehandling - Skölj med varmt tvålsvatten Använd ALDRIG lösningsmedelsbaserade rengöringsmedel. Rakblad eller andra vassa verktyg, slipande eller starkt alkaliska rengöringsmedel, lösningsmedel, blybensen och koltetraklorid bör inte användas.

Använd en mikrofiberduk som helt enkelt är fuktad med vatten. I synnerhet vid större ansamling av smuts eller oljiga fläckar, använd aceton- och bensinfria lösningsmedel eller förtunnare.

OBS: Allt ovanstående gäller endast utsidan av visiret där ingen Anti Fog-beläggning har applicerats.


COVID 19: s rekommendationer är att alla anställda i alla branscher tvättar visiret i slutet av arbetsdagen i inget annat än varmt tvålsvatten.

MÄRKNING

Produkten är märkt med:

- CE-märket som visar att produkten uppfyller kraven i PPE-förordningen (EU) 2016/425.
- Identifiering av tillverkare och produktkod / artikelnummer.
- Bokens piktogram som visar läs dessa instruktioner

HOPSÄTTNING DIAGRAM

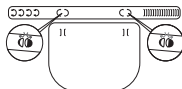

1. Vik filkarna på pannbandets rem som visas



2. För in filkarna på huvudbandet i skärorna på den genomskinliga skärmen.



3. Använd filkar och slitsar i remmen och justera remmen till önskad passform.

Ladda ner försäkringen om överensstämmelse
@ www.portwest.com/declarations